

Spaceline EMCIA

L'ergonomie au service de
l'efficacité



Thinking ahead. Focused on life.

Travailler de manière efficace et détendue

Avec son unit de traitement ergonomique et fonctionnel Spaceline EMCIA, Morita vous offre plus de liberté de mouvement en traitant vos patients. Le concept orienté sur l'utilisateur favorise une posture de travail physiologique saine afin que vous n'ayez que des mouvements naturels lors de vos traitements. Spaceline EMCIA allie le confort et la fonctionnalité pour un travail efficace et détendu.



Spaceline EMCIA KFO



Spaceline EMCIA SMT



Spaceline EMCIA PDW

Des mouvements harmonieux pour le dos à chaque étape du traitement

Près de 90% des dentistes ont déjà souffert de maux de dos ou cervicaux. Pour presque 70% d'entre eux, ces symptômes apparaissent au bout d'une semaine - et pour 50 % après même quatre heures de travail¹. L'unité de traitement Spaceline EMCIA réduit les tensions physiques au minimum.

Conçu conformément au concept de traitement ergonomique du Dr Daryl Beach, qui préconise de se tenir dans une posture assise et bien droite et de travailler dans la position de 10h à 12h30 afin d'exercer votre pratique de manière détendue.



1) William H. M Castro, Victor P. Meyer, Wolfgang Micheelis (2002) : „des douleurs de nuque et douleurs dans le dos ce que cela signifie pour le dentiste“; URL : http://www.zm-online.de/hefte/Nacken-und-Rueckenschmerzen-und-was-sie-fuer-den-Dentiste-bedeutet_21772.html; stand 12, décembre 2012.



Une position assise stable et confortable

Spaceline EMCIA vous permet de vous asseoir dans une position droite et stable. Installé derrière votre patient, à 12:00 par rapport à lui. Vos avant-bras et coudes sont détendus de part et d'autre de votre buste de manière à ce que vos doigts soient dans votre champ de vision idéal. Cette posture qui ménage votre colonne vertébrale favorise la concentration et, donc, l'exactitude de vos mouvements à chaque étape du traitement.



Accès simple aux instruments

Spaceline EMCIA vous offre toutes les fonctions importantes et les instruments essentiels à votre travail à une distance commode. Les instruments se trouvent dans le dossier du fauteuil. Les éléments praticien et assistant sont disposés de sorte à permettre une prise optimale à tout moment, et ce sans torsion de la colonne vertébrale ou devoir sans cesse se replacer devant le patient.




Instruments de traitement intégrés

Les instruments intégrés dans le dossier du fauteuil patient peuvent être saisis de manière intuitive et rapide que ce soit par le praticien ou l'assistante. En outre, le concept de rangement unique veille à ce que les instruments se trouvent hors du champ de vision de vos patients ce qui contribue à détendre et rasséréner l'atmosphère.

Des interventions optimales dans un espace réduit

Spaceline EMCIA offre une liberté de mouvement maximale dans le plus petit des espaces. Ce concept ingénieux prend en compte tous les mouvements réalisés dans l'environnement de traitement et garantit des interventions optimales. D'un design visant l'économie de place, Spaceline EMCIA vous permet d'aménager votre espace de travail au gré de vos besoins : vous pouvez installer un seul poste de travail dans une petite salle ou plusieurs unités de traitement dans l'espace disponible tout en conservant votre décoration intérieure afin de créer des espaces agréables pour vos patients.

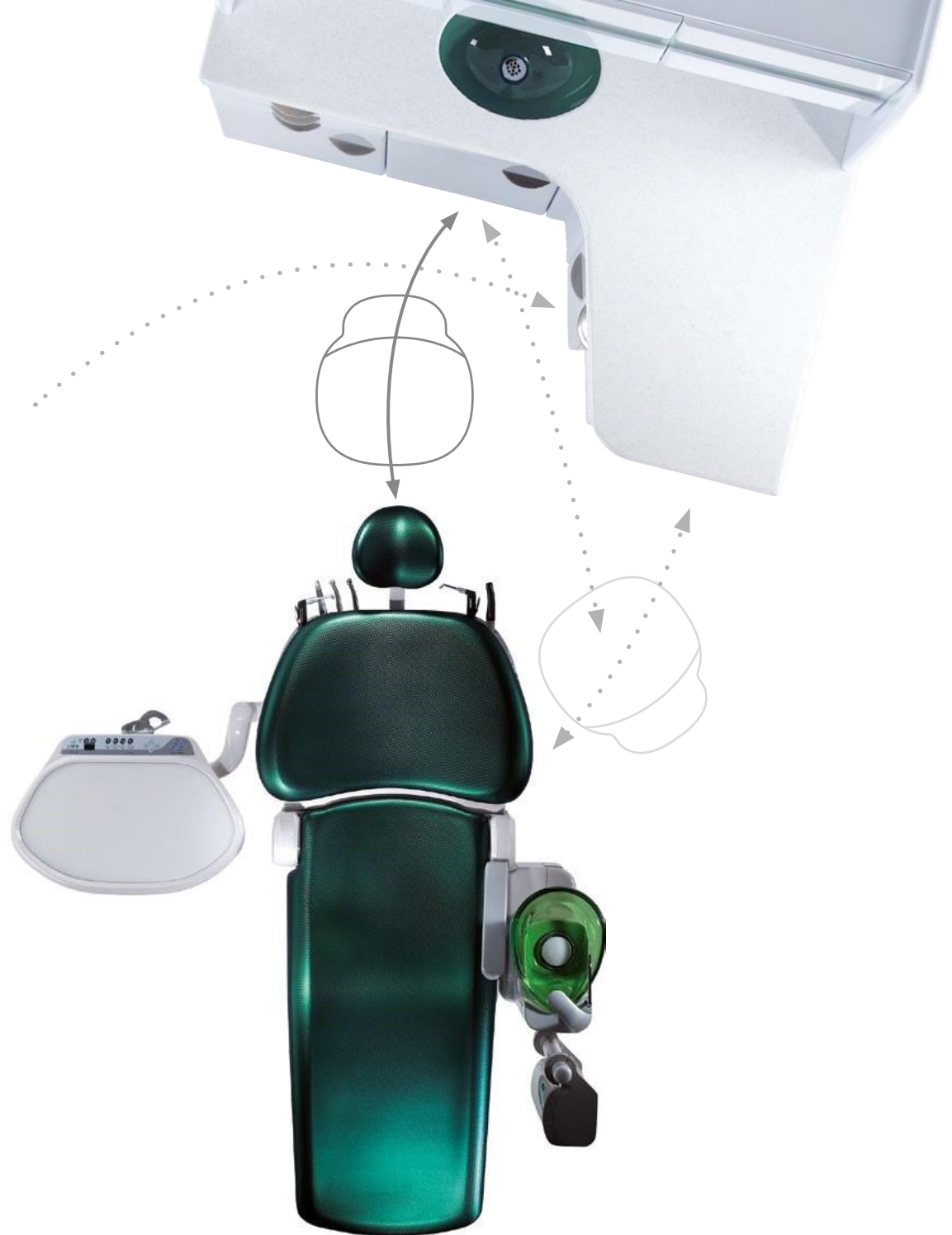



Exploitation optimale de l'espace disponible

Tous les équipements Spaceline EMCIA prennent en compte les déplacements du praticien et de l'équipe soignante autour de lui. Ainsi pendant l'intervention, le chirurgien-dentiste peut aisément utiliser le lavabo intégré dans le meuble alors que l'assistante est occupée à d'autres tâches.



Plus d'espace de rangement

Spaceline EMCIA vous offre des espaces de rangement flexibles vous permettant d'aménager votre environnement de travail à votre convenance. Selon vos exigences, vous pouvez choisir entre des instruments intégrés dans le dossier du fauteuil, un plateau monté sur le dossier ou avec bras orientable côté praticien. Un plateau supplémentaire, monté au plafond, est disponible doublant ainsi la surface de rangement.



Mieux voir

Les LED très puissantes éclairent le champ d'intervention avec un large faisceau lumineux homogène. Commandé par un détecteur de mouvements, le scialytique crée une ambiance lumineuse agréable dans votre environnement de travail. Par ailleurs, il est doté d'un miroir escamotable grâce auquel vous pouvez communiquer avec vos patients de leur plans de traitements à réaliser.

Tout pour la relaxation du patient

Doté d'une technique à la pointe de la modernité et d'un design très fonctionnel, Spaceline EMCIA vous aide à répondre aux besoins du patient en termes de confort et de sécurité.



Accès facilité pour s'installer et quitter le fauteuil

Le repose-pied motorisé permet aux patients de s'installer sans gêne dans le fauteuil et de se relever également sans difficulté. Un atout non négligeable pour vos jeunes patients et ceux à mobilité réduite.



Positionnement simple

Avec son système hydraulique, vous pouvez déplacer le fauteuil du patient facilement dans la position exigée de manière souple et sans à coup. Un avantage supplémentaire est le mode vitesse lente (slow-speed) qui permet de régler de


manière ultra précise le fauteuil afin de se concentrer sur une zone de traitement. Particulièrement confortable lors de séance de travail sous microscope.



Position allongée sûre et confortable Le revêtement confortable s'adapte parfaitement au contour du corps de votre patient. Il réduit la tension et la fatigue de vos patients à un minimum - même lors de longues séances de traitement.

Options et spécifications

Aperçu des options disponibles pour
Spaceline EMCIA

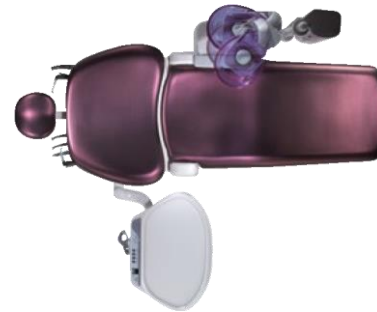

	Spaceline EMCIA KFO	Spaceline EMCIA SMT	Spaceline EMCIA PdW
..... Instruments intégrés dans le dossier côté praticien	•	•	—
..... Instruments intégrés dans le dossier côté assistante ou élément assistante librement orientable	•	•	•
..... Plateau monté sur le dossier	—	•	—
..... Plateau côté praticien avec bras orientable (PdW Tray)	—	—	•
..... En option, fauteuil patient avec repo se-pied motorisé	•	•	•
..... En option, plateau supplémentaire monté au plafond	•	•	•

Caractéristiques

Oléohydraulique
Fauteuil patient avec ou sans repose-pied motorisé
Tête standard ou à articulation multiple
Accoudoir côté praticien¹
Accoudoir côté assistante
Revêtement en silicone du plateau côté praticien
Élément assistante avec panneau de commande et tablette
Tablette assistante montée sur la colonne hydrique
Raccords rapides pour eau fraîche, air comprimé et hydrocolloïdes
Port USB sur la tablette côté praticien²
Plateau souris²
Scialytique LED avec détecteur et miroir de communication patient escamotable
Tablette pour les affaires du patient
PC monté sur le scialytique
Plateau supplémentaire monté au plafond
Système de microfiltres Sterapore pour l'eau fraîche et système à air comprimé
Système de rinçage pour flexibles conducteurs d'eau
Système de nettoyage pour instruments à entraînement pneumatique
Système de désinfection intégré pour les flexibles conducteurs d'eau
Traitement permanent de l'eau fraîche
Crachoir en verre disponible dans différentes teintes
Remplissage automatique du gobelet avec capteur optique
Teinte de la sellerie au choix

1 Option pour la version avec repose-pied à descente automatique

2 Option pour Spaceline EMCIA PdW

Instruments côté praticien - Version KFO / SMT

Seringue multifonction, avec lumière LED (option)
Jusqu'à 2 raccords pour micromoteur, moteur et lumière LED inclus
Jusqu'à 2 instruments à entraînement pneumatique (max.) avec lampe halogène ou LED

Instruments côté praticien - Version PdW

Seringue multifonction, avec lumière LED (option)
Jusqu'à 2 raccords pour micromoteur, moteur et lumière LED inclus
Jusqu'à 2 instruments à entraînement pneumatique (max.) avec lampe halogène ou LED
Lampe à polymériser à LED²
Détartreur ultrasonique à LED

Instruments côté assistante

Seringue multifonction, avec lumière LED (option)
Aspiration chirurgicale
Pompe à salive



Élément assistante flexible
avec 3 instruments et panneau
de contrôle



Tête à articulation multiple



Plateau supplémentaire
Monté au plafond



Distributeur officiel agréé

Idem dentaire SARL
3 rue aux juifs 14000 Caen

Tél : 09.50.18.47.00
Fax : 09.55.18.47.00
Mobile : 06.33.66.78.78

Mail : contacts@idem-dentaire.fr
Web : <http://www.idem-dentaire.fr>



Distribution assurée par
J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Germany
T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299

Developpé et produit par
J. Morita Mfg. Corporation
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8533
Japan
T +81. 75. 611 2141, F +81. 75. 622 4595 www.morita.com

Sous toute réserve d'erreurs et de modifications technique.
JME BS FR 1017 *1

Offre été 2018

EMCIA up PDW (plateau tablette)

Fauteuil oléo hydraulique 4 mémoires système shock free
Tête ergonomique et accoudoir côté assistante
Pédale multifonction
Crachoir orientable avec bassin en verre et remplissage jet de verre automatique
Système de rinçage des instruments
Système de désinfection
Branchement one touch air/eau
Filtre bactériologique en admission d'air et eau
Système de nettoyage anti reflux pour instruments pneumatiques
Tapis silicone pour tablette et protection de pieds

1 x Cordon pour turbine fibrée
2x micromoteurs à induction et éclairage LED TR-SII-O-LD
1x détartreur Piezo LED Solfy SC-700-LD
1 x seringue air/eau praticien
1 x seringue air/eau assistante
1 x canule de pompe à salive
1 x canule d'aspiration chirurgicale

Prédisposition pour système d'aspiration à anneau humide
Vanne crachoir

Eclairage LED Luna Vue LD-CL-30-U
Fonction d'éclairage automatique pour éclairage LED Luna Vue
Miroir de courtoisie sur éclairage LED Luna Vue
Tablette vide poche sur colonne hydrique côté assistante

1 x tabouret d'opérateur OSJ-1-N avec vérin à gaz

38790 € ttc ou 522.90 € ttc / mois sur 84 mois

*Offre valable du 1^{er} juin au 08 octobre 2018 dans la limite du stock disponible

*Tarif indicatif catalogue 2018 du modèle proposé avec options 60583.20€ ttc

*délai de livraison indicatif : 30 jours à compter de la commande

Équipements pour diagnostic et imagerie

Postes de traitement

Pièces a main et instruments

Systèmes d'endodontie

Systèmes laser

Équipements de laboratoire