

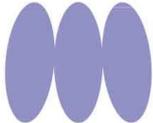


Veraview iX Intraoral X-Ray Compact Design with Exceptional Image Quality

 J.MORITA MFG. CORP.

- Easy to position with compact head design
- Small control panel minimizes installation space
- Patient protection with constant voltage control
- LED buttons with intuitive graphics
- Easy to switch between film and digital timer tables

Thinking ahead. Focused on life.


MORITA

Equipped with LED guide for focal point positioning



Quickly confirm position with the transparent cone and LED guide



Specifications	
Model	Veraview iX
Voltage	100-120 / 220-240 VAC
Tube Potential	60 / 70 kV
Tube Current	7mA
Exposure Time	10 ms to 2 seconds
Weight	approx. 23 kg

- **Ease of use positioning features**
 - Positioning improved with the lightweight and compact design from pivot to cone.
 - Transparent cone to visually confirm position.
 - Easy to understand LED guide
 - Slender, lightweight arm for smooth, effortless movement
- **Small control panel minimizes installation space**
 - Small and compact, can be installed virtually anywhere.
- **Patient protection with constant voltage control**
 - Constant voltage control minimizes patient soft x-ray absorption.
 - Tube voltage options include 60 or 70 kV.
- **Easy to switch between film and digital timer tables**
 - Settings automatically saved in memory for both film and digital timer tables.



- **LED buttons with intuitive graphics**
 - See a visual representation of the current selection in the control panel for quick confirmation

Developed and Manufactured by
J. MORITA Mfg. Corp.
 680, Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto,
 612-8533 Japan
 Tel: +81-75-611-2141, Fax: +81-75-622-4595,
<http://www.morita.com>

Distributed by
J. MORITA CORPORATION
 33-18, 3-Chome, Tarumi-cho Suita City, Osaka, 564-8650 Japan
 Tel: +81-6-6380-1521, Fax: +81-6-6380-0585,
<http://www.morita.com/asia>

J. MORITA EUROPE GMBH
 Justus-von-Liebig-Strasse 27A, D-63128 Dietzenbach, Germany
 Tel: +49-6074-836-0, Fax: +49-6074-836-299,
<http://www.morita.com/europe>

J. MORITA ANZ Representative Office
 Suite 2.05, 247 Coward Street, Mascot, NSW 2020, Australia
 Tel: +61-2-9667-3555, Fax: +61-2-9667-3577,
<http://www.morita.com/anz>

J. MORITA Middle East
 Saraya Al Wessam Building, Appt 902 Cross
 Roads Tag Al Roasaa & Abu Heif SabaPacha, Alexandria, 21311, Egypt
 Tel: +203-58-222-94, Fax: +203-58-222-96,
<http://www.morita.com/middleeast>

Équipements pour Diagnostic et Imagerie

Modules de Soins

Pièces à Main et Instruments

Appareils Endodontique

Technologie Laser

Équipements de Laboratoire

Système de formation et d'enseignement

Aide médicale

Prix Public catalogue 6489€ TTC

en offre ADF à partir de **4890€ TTC**

Offre valable uniquement sur la région Normandie et jusqu'au 29 décembre 2019.

Détail de la configuration sur demande.



Distribué par

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Str. 27a

63128 Dietzenbach

Germany

T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299

www.morita.com/europe

Développé et manufacturé par

J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku

Kyoto 612-8533

Japan

T +81. 75. 611 2141, F +81. 75. 622 4595

www.morita.com

Concessionnaire pour la Normandie

idem dentaire

créateur de cabinets dentaires
matériels et services

idem dentaire sarl

3 rue aux juifs 14000 CAEN

tél 09.50.18.47.00 fax 09.55.18.47.00

contacts@idem-dentaire.fr

<http://www.idem-dentaire.fr>

Dispositif médical (DM) de classe II A,

réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la

Sécurité Sociale. Lire attentivement avant l'utilisation

le mode d'emploi et l'étiquetage Organisme certificateur :

TÜV RHEINLAND 0197

CE0197 Version Juillet 2017

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
JME FR FA 0717 *1.